

Revoluční katetry nové generace

- ✓ Globálně patentovaná technologie
- ✓ Certifikováno a schváleno pro zavedení do praxe v Evropské unii
- ✓ Patentovaná everzibilní trubička

Urinální katetr RIOCATH

Mechanismus RIOCATH je založen na postupném vybalování vnitřní vrstvy katetru, která na jeho vrcholu plynule přechází ve vrstvu vnější – tak, jak se katetr plynule vybaluje zevnitř ven, stejně jako u očí hlemýždě.



Bez infekce

Díky jedinečnému principu vybalování trubičky zevnitř ven a žádnému posouvání během zavádění je vyloučeno riziko bakteriální kontaminace.



Bez bolesti

Inovativní konstrukce minimalizuje bolest při zavádění i při vyjímání katetru.



Šetrná aplikace

Tvar katetru se při zavádění snadno adaptuje a přizpůsobuje anatomii pacienta, což snižuje riziko mechanického i jiného poškození.



URINÁLNÍ KATETR RIOCATH

Urinální katetr RIOCATH - 16 FR

REF 02.01.300.01.30

Délka výsuvu: 300 mm

Počet v balení: 1ks

Urinální katetr RIOCATH - 14 FR

REF 02.01.080.01.30

Délka výsuvu: 80 mm

Počet v balení: 1ks



Výrobce:

Riocath Medical Devices, a.s.

Podbabská 1112/13


160 00 Praha 6

Česká republika

www.riocath.cz

ev.č. : 00897460


r.č.v. : 058835

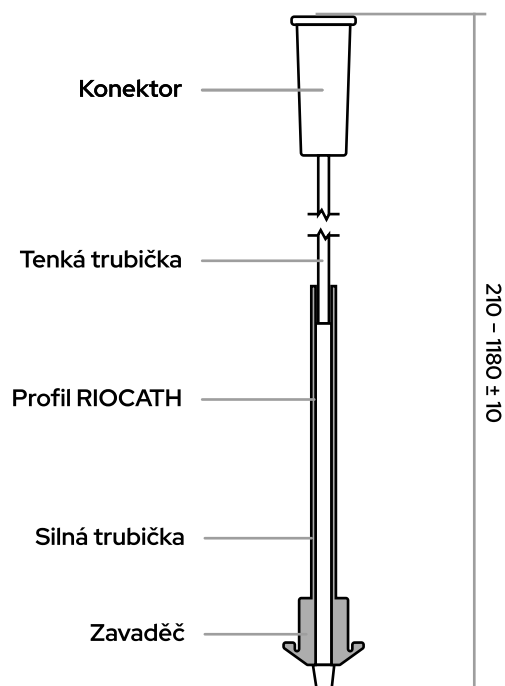

PATENTY A CERTIFIKACE



Evropský patent
3290079

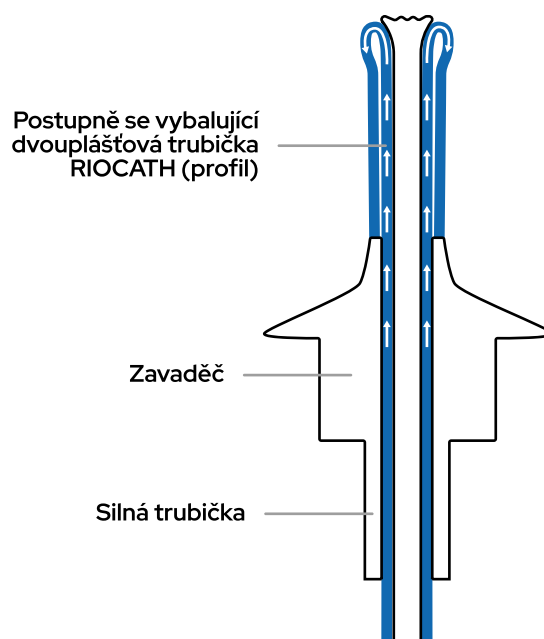

Patentováno v zemích: Spojené státy americké, Čína, Izrael, Japonsko, Korejská republika, Singapur, Austrálie, Kanada, Euroasie, Albánie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Švýcarsko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Monako, Makedonie, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko, San Marino, Turecko, Spojené arabské emiráty, Brazílie, Egypt, Indie, Mexiko, Saudská Arábie